

1.3 Тест-полоски для собак и кошек

Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови представляют собой тонкие полоски с химическими реагентами, которые вступают в реакцию с глюкозой и производят небольшой электрический ток.

Тест-полоски на содержание β -кетонов представляют собой тонкие полоски с химическими реагентами, которые вступают в реакцию с β -кетонами и производят небольшой электрический ток. Когда образец крови наносится на тест-полоску, в результате реакции создается небольшой электрический ток. Глюкометр измеряет слабый ток и показывает результат в окне дисплея.



Контактные стержни: вставьте этот конец тест-полоски в канал полоски до упора.


Верхний край: Нанесите сюда образец крови.

Окно подтверждения: Убедитесь, что было применено достаточное количество образца крови.



Упаковка тест-полосок: Тест-полоски упаковываются либо в общий контейнер, либо в односекционный контейнер. Это зависит от комплектации.

ВАЖНО: Наносите образец крови только на кончик тест-полосок. Не наносите кровь на верхнюю часть тест-полоски, так как это может привести к неточным показаниям.

Нанесение образца крови

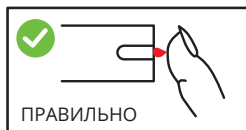

Окно подтверждения

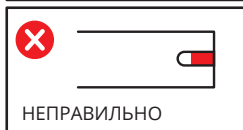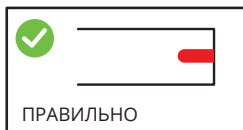

Глюкометр покажет неточные результаты теста, если образец крови будет применен неправильно, например, недостаточно образца крови или это вторая капля крови. Повторите тест свежей тест-полоской, когда первой капли недостаточно на верхнем краю тест-полоски.

На каждой упаковке тест-полосок напечатан кодовый номер (CODE), номер партии (LOT) и срок годности не-
вскрытой упаковки.

1.4 Хранение и использование

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими правилами хранения и использования:

- Хранить тест-полоски следует в прохладном, сухом месте при комнатной температуре от 2 до 30 ° C (36-86°F), избегая экстремальных температур или воздействия солнечных лучей.
- Не хранить в холодильнике и не замораживать.
- Не хранить и не использовать тест-полоски во влажных помещениях, таких как ванная.
- Не хранить глюкометр и/или тест-полоски рядом с отбеливателем или чистящими средствами, содержащими отбеливатель.
- Устанавливать на место колпачок контейнера с тест-полосками сразу после извлечения тест полоски.
- Использовать тест-полоску сразу после того, как она будет извлечена из контейнера или одностороннего контейнера.
- Не использовать тест-полоски после истечения срока годности.
- Не использовать тест-полоски повторно.